



■ 設置方法

設置場所の開口寸法は、製品の総寸法に対して
「幅+20mm」「高さ+15mm」「奥行+70mm」の
クリアランスを確保して設計・施工してください。

〔例〕 製品総寸法：W3,600mm × H1,800mm × D400mm

開口寸法： W3,620mm × H1,815mm × D470mm

製品設置後は、三方枠または壁開口補強材へビス固定を行い、
周囲の隙間はコーキングにて丁寧に仕上げてください。
この手順により、器材戸棚をスムーズに設置でき、仕上がりもきれいに整います。

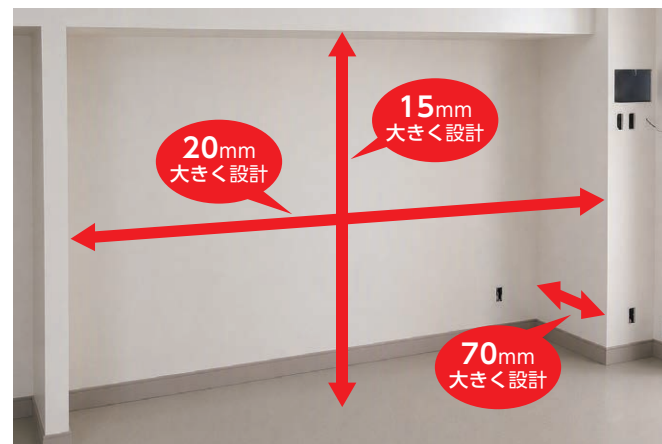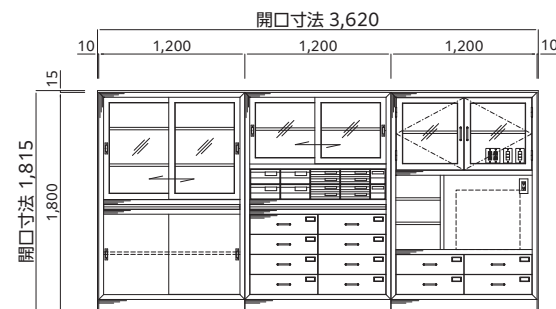

設置前



設置完了後

■ オペタイマー

手術室の設備として必要な製品です。
現在時刻はアナログ時計で、麻酔時間・手術時間はデジタルで表示されます。
停電補償機能付です。

KT-102



KT-101



仕 様	品 番	KT-102	KT-101
寸 法		W950×H350×D122mm	W700×H350×D122mm
電 源		AC100V 50-60Hz	
表示時間		23時間59分59秒迄	
停電補償		デジタル計：11時間(表示消)、アナログ時計：15分	

※ 詳細につきましては別途お問合せください。

取扱店



医療機器製造販売業許可番号 11B3X10022

タイホー株式会社

本社・工場 / 〒358-0032 埼玉県入間市狭山ヶ原 232-3
TEL (04) 2934-5141 ・ FAX (04) 2934-4122
https://www.taiho-cab.co.jp E-mail. info@taiho-cab.co.jp



■製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがあります。

2026.10

[置型埋込器材戸棚] 手術室用設備機器

＋ 設置が簡単でバリエーション豊富な
クリニック向けのシリーズです。 ＋

歯科

眼科

耳鼻咽喉科



動物病院




産婦人科



タイホー株式会社

清潔で使いやすい置型埋込器材戸棚は手術室を快適にします。

備品や消耗品の収納・管理に欠かせない器材戸棚。
手術の効率性や安全性を高める為に重要な要素です。
ヘアラインが美しいステンレス製(SUS304 ヘアライン仕上)と
柔らかなイメージのスチール製(SECC パウダーコーティング仕上)から
お選びいただけます。

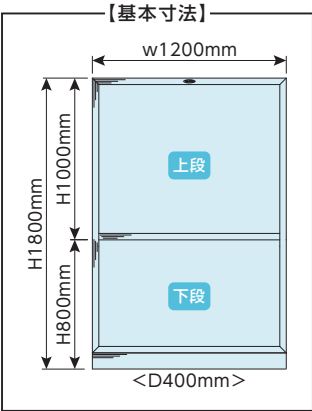


※一般的置型キャビネットとしてもご使用いただけます。

対応可能な オプション例	・寸法変更 ・オープンタイプ(扉なし)	・両開き扉 ・棚板枚数変更	・コンセントプレート・LANプレート取付
-----------------	------------------------	------------------	----------------------

▶ OU-5S
(SECC/パウダーコーティング仕上)



▶ OU-5
(SUS304ヘアライン仕上)

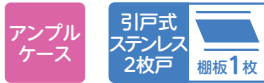

▶ OU-45S
(SECC/パウダーコーティング仕上)



▶ OU-45
(SUS304ヘアライン仕上)



▶ OU-2S
(SECC/パウダーコーティング仕上)




▶ OU-2
(SUS304ヘアライン仕上)



▶ OU-3S
(SECC/パウダーコーティング仕上)



▶ OU-3
(SUS304ヘアライン仕上)

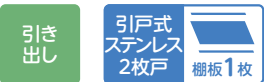

▶ OU-8S
(SECC/パウダーコーティング仕上)



▶ OU-8
(SUS304ヘアライン仕上)



▶ OU-48S
(SECC/パウダーコーティング仕上)



▶ OU-48
(SUS304ヘアライン仕上)



▶ OU-4S
(SECC/パウダーコーティング仕上)




▶ OU-4
(SUS304ヘアライン仕上)



▶ OU-34S
(SECC/パウダーコーティング仕上)



▶ OU-34
(SUS304ヘアライン仕上)

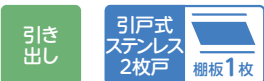

▶ OU-458S
(SECC/パウダーコーティング仕上)



▶ OU-458
(SUS304ヘアライン仕上)



▶ OU-PCS
(SECC/パウダーコーティング仕上)



▶ OU-PC
(SUS304ヘアライン仕上)

